

■アップデート操作マニュアル

◎はじめに：

本マニュアルは、2022年9月21日より実施される和田精密歯研（株）ジルコニア製品の名称変更に伴い、同年9月6日までにリリースした【MenuMaker】【Menu321】アプリに登録されているジルコニア製品の旧名称の短冊について、新名称短冊への更新作業の手順について解説したものです。

改訂内容は、基本的にはジルコニア製品を統合した名称<ZR>への変更のみですが、アプリの短冊更新では、前歯・臼歯のバリエーション合わせて27短冊です。詳しくは、1項目の新旧対応表をご覧ください。

更新作業に際しましては、各アプリのユーザーの医院様や関係各位の皆様には、お手数をおかけしますが、本マニュアルを参考にご対応くださいますようお願いいたします。

☆

なお、2022年9月13日以降は、新名称のジルコニア製品を更新済みで出荷しております。以下に記載したバージョンのアプリは、今回ご案内する更新作業は必要ございません。（※アプリのバージョン表示は、それぞれの起動画面の中央に表示しています）

また、導入当初と異なり新しいOSのパソコンを買い替えられて、新しいOSに対応したアプリにバージョンアップされる場合や、スタンダード版からアドバンス版にアップデートをご希望になる場合などは、ぜひ更新済みアプリをご利用ください。

▼更新済みアプリ：2022年9月13日以降出荷分

スタンダード版	アドバンス版
【MenuMaker_v1】 Ver.1.7.3	【MenuMaker_v3】 Ver.3.8.3
【Menu321_v2】 Ver.2.9.0	【Menu321_v3】 Ver.3.8.3

<目次> □1：ジルコニア短冊名称・新旧対応表

- 2：新名称短冊を追加登録するためのインポート操作方法
- 3：旧名称短冊を省略・削除するためのリスト画面操作方法

□1：ジルコニア短冊名称・新旧対応表

新タイプ	新名称	短冊番号 共通	旧名称	旧タイプ
プレミアム		C_205_fm	CAM 美麗ジルコニア D※	プレミアム
		C_205s_fm	CAM 美麗ジルコニア D	
ハイグレード	ZR-B	C_101_f	ジルコニア D	ハイグレード
		C_101_m	ジルコニア D	
		C_104_f	ジルコニア	
		C_104_m	ジルコニア	
		C_203_f	Pure Pearl (色付け有)	
		C_203_m	Pure Pearl (色付け有)	
	ZR-E	C_206s_fm	Pure Pearl (色付け有)	ハイグレード
		C_206_fm	Pure Pearl (色付け有)※	
		C_204_f	Pure Pearl (エステティック)	
		C_204_m	Pure Pearl (エステティック)	
		C_209_f	Pure Pearl (エステティック)	
		C_209_m	Pure Pearl (エステティック)	
		C_209s_fm	Pure Pearl (エステティック)	
		スタンダード	ZR-M	
C_151_m 新	C_207s_fm5 (4色)			
エコノミー	ZR-C	C_201_f	ジルコニア Pure Pearl	スタンダード
		C_201_m	ジルコニア Pure Pearl	
		C_202_f	Pure Pearl (色付け無)	
		C_202_m	Pure Pearl (色付け無)	
		C_207s_fm5	Pure Pearl (色付け無)	
		C_207_fm5	Pure Pearl (色付け無)※	エコノミー
		C_208_fm	ジルライトクラウン※	
		C_208s_m	ジルライトクラウン	
		C_301_m	ジルライトクラウン	
		C_302_m	ジルライトクラウン	

注) 名称中の D は短冊写真にダイヤモンド表示入り/※は Teeth Gallery 対応版

□2：新しい短冊を追加登録するためのインポート操作方法

▼概要：

歯の治療メニューの公式 Web サイトの<追加短冊インポートファイル>ページの追加短冊リスト最下段・最新欄の「ジルコニア名称改訂ファイル」をダウンロードし①、ご利用中のそれぞれのアプリにインポートします。

改訂されるジルコニアの追加短冊リストは、ダウンロードするファイルとは別に、同じ場所から PDF ファイルをダウンロード②して参照できます。


★公式 Web サイトは、<https://www.menu321.com/>



その他の資料リンク

1：ユーザーズガイド	PDF (A4, 8p)
2：追加短冊ファイルダウンロード	ユーザーサポートページへ
3：セミナー①「同意を増やす」アプリ活用法	PDF (レジュメ/A4, 15p)
3：セミナー②「お品書き作成」アプリ活用法	PDF (レジュメ/A4, 13p)
4：Menu321の追加機能「説明シート6種」	PDF (チラシ/A4)
5：ケース別料金表（販売価格リスト）	料金解説ページへ

▼追加短冊ファイルダウンロードできるユーザー・サポート・コーナー

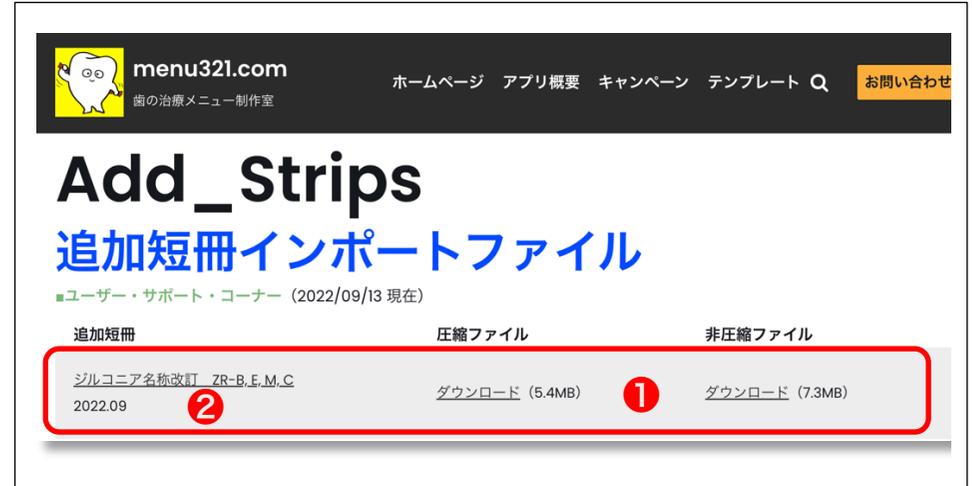

▽注意事項：（詳細は、各 OS 欄で後述します）

●Windows と Mac のパソコンで「ダウンロード」を選択する時は、そのまま「開く」ことなく、必ずダウンロードフォルダに「保存」します。

iPad でダウンロードする時は、必ず「非圧縮ファイル」を選択します。すると自動的に FileMaker Go の管理ファイルとして保存されます。

●新しくダウンロードするファイル名は、下記の通りです。


- ・圧縮版 [_Menu_inport_xx(ZRnew).zip]
- ・非圧縮版 [_Menu_inport_xx(ZRnew).fmp12]

※パソコン内に Zip 圧縮・解凍アプリがインストールされていない場合は、非圧縮ファイルのダウンロードを選択します。

※詳しくは、以降の OS 別の操作手順をごらんください。

▼操作手順：【Windows】 【MacOS】 の場合

- 1) 【ダウンロード】ボタン（非圧縮ファイル）を選択します。
- 2) Windows10 や MacOS は、自動的にダウンロードフォルダに「保存」されます。ファイル名は、[_Menu_inport_xx(ZRnew).fmp12] です。
※圧縮ファイルの場合は、ダウンロードフォルダ内で解凍します。
- 3) アプリ【Menu321】、または【MenuMaker】を通常通り起動します。
起動画面のまま…次に

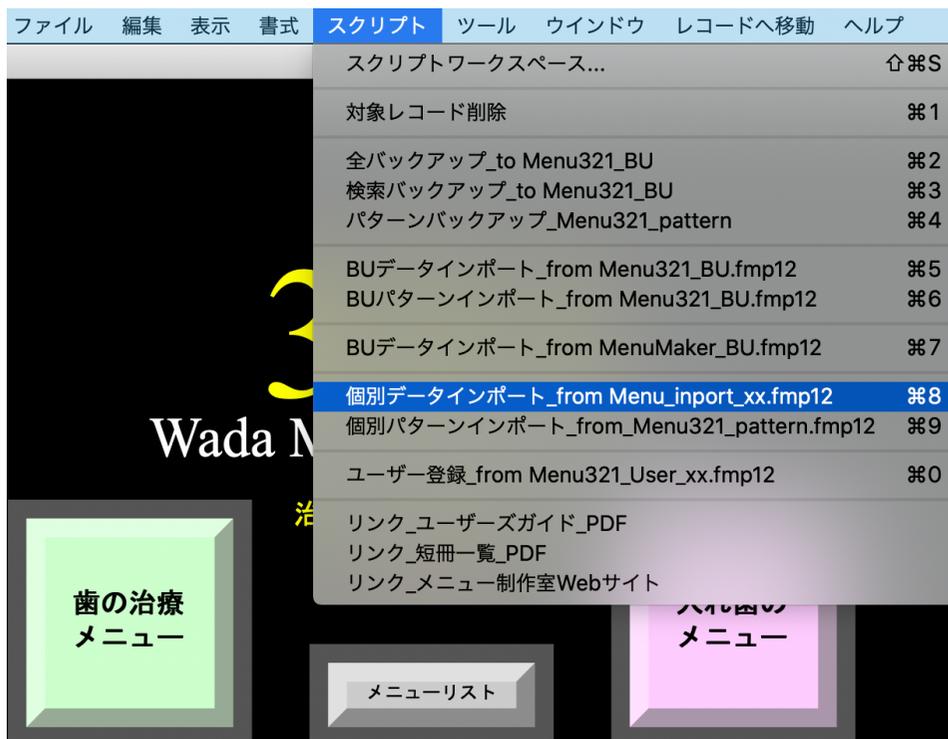

- 4) アプリの「スクリプトメニュー」から「個別データインポート」を選択します。次のウインドウが開きますので【インポート】を選択します。




- 5) ファイル「_Menu_inport_xx.fmp12」が見つからなかったため、処理を完了できません。とアラームが表示されますので「OK」します。



- 6) 次に表示される「ファイルを開く」ウインドウで次の確認をします
 - ①まず「ダウンロード」フォルダを探し選択します。
 - ②次に「ファイルの種類」を「すべてのファイル」が選択されていることを確認します。Mac の場合は「表示」を「すべて」とします。
 - ③そして、先にダウンロードした追加短冊ファイルを選択して「開く」を選択するとインポートが完了します。

インポートするファイル名は「_Menu_inport_xx(ZRnew).fmp12」です。

▼Windows 10 の場合

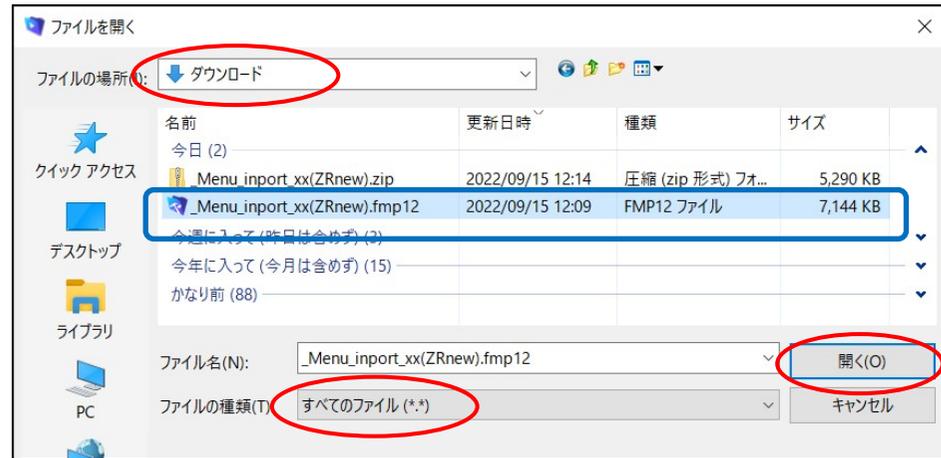


▼Mac OS 10.15 の場合 (Finder はリスト表示)



◎備考：ジルコニアだけでなく、同様に他の追加短冊ファイルをインポートすることができます。公式 Web サイトの<その他の資料リンク>から 2：追加短冊ファイルダウンロード/ユーザーサポートページをご確認ください。操作方法は同じです。

7) 次に表示されるメッセージウインドウでインポートが完了しました。【OK】します。

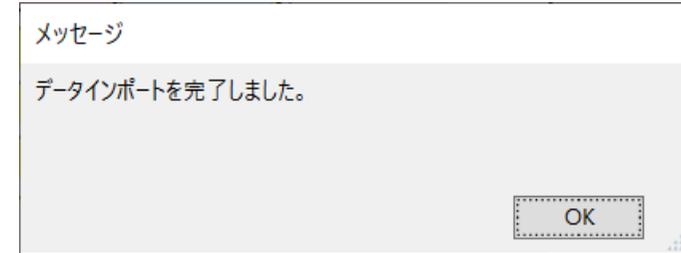

8) 「メニューリスト」画面でインポートした短冊が確認できます。【初期画面】ボタンで、アプリの起動画面に戻ります。



☞参考) 継続して旧名称短冊を省略または削除をすることができます。

継続して作業を行う場合は、次項のページへお進みください。

□3：旧名称短冊を省略・削除するためのリスト画面操作方法

▼操作手順：【iPad】の場合

▼初めてインポート作業をする場合は、◎1) の手順から始めてください。


▼注意) 過去に一度でも、追加インポートダウンロードを行った場合は、以下の①～④の事前準備をおすすめください。

■事前準備：過去のインポート用ファイルを削除する

①ダウンロードする前に、まず、FileMaker Go を起動させます。


※下図は、歴代の FileMaker Go 16, 18, 19 のアプリのアイコンです。

以下、iPad にインストールされているアイコンでお考えください。

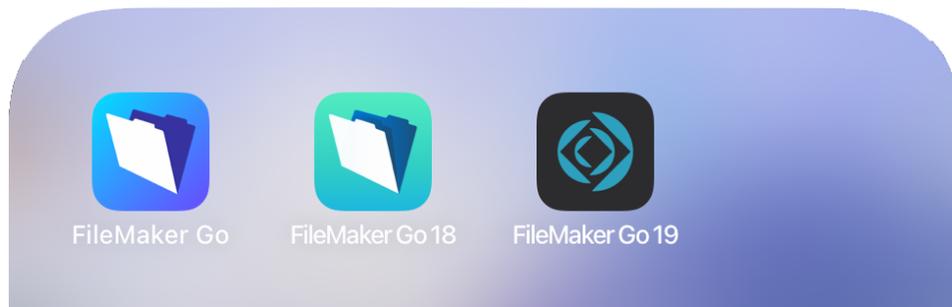

②起動後、【デバイス】ボタンを選択し①、Go18, 19 は【マイ App】

[_Menu_inport_xx.fmp12]ファイルがあれば、チェックアイコンを選択②

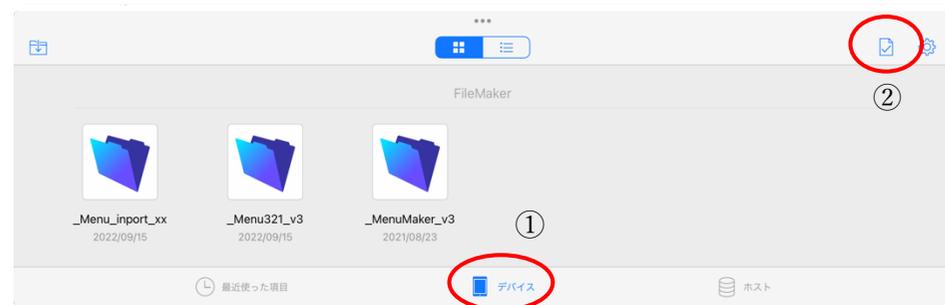

③[_Menu_inport_xx.fmp12]ファイルがあれば選択し③【削除】④します。



④[_Menu_inport_xx.fmp12]ファイルが無いことを確認して、追加インポート作業を始めます。



※以上は、FileMaker Go 16 のアイコンと画面でご説明しました。

※事前準備は、ここまでです。

◎iPad で初めてインポート作業する場合の手順

▼以下は、FileMaker Go 19 のアイコンと画面でご説明します。


1) まず、インポート用ファイルのダウンロードを行います。
公式 Web サイトのユーザーサポートコーナーから、今回のジルコニア名称改訂欄の「非圧縮ファイル」の【ダウンロード】ボタンを選択します。




2) ダウンロードしたあと「次で開く」を選択して、開くアプリとして [FileMaker Go 19] を選択します。



※アイコンリストの中に [FileMaker Go 19] が表示されていなければ、次の図に示すように「その他」のアイコンを選択し、App リストの中から [FileMaker Go 19] を探して選択します。

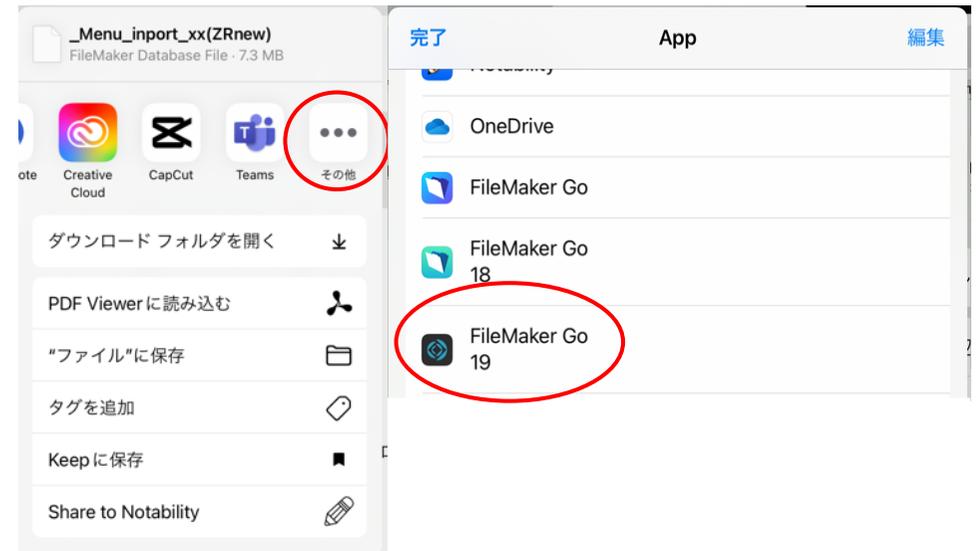


3) 追加短冊が登録されたインポートファイルが開き、メニューリストが表示されます。次に【操作】ボタンをタップします。

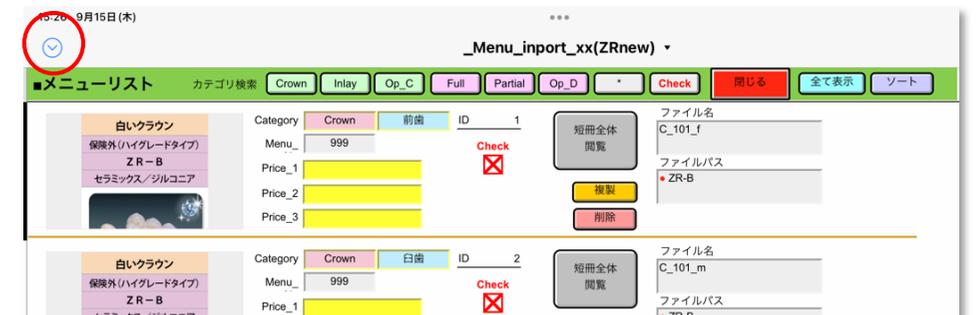

4) 保存するファイル名を変更するために、「名前を付けて保存」を選択し
 <操作：名前を付けて保存/送信からデータベースを選択します。




5) 名前を「(ZRnew)」を消去して「_Menu_inport_xx」として、【続行】
 ボタンをタップします。

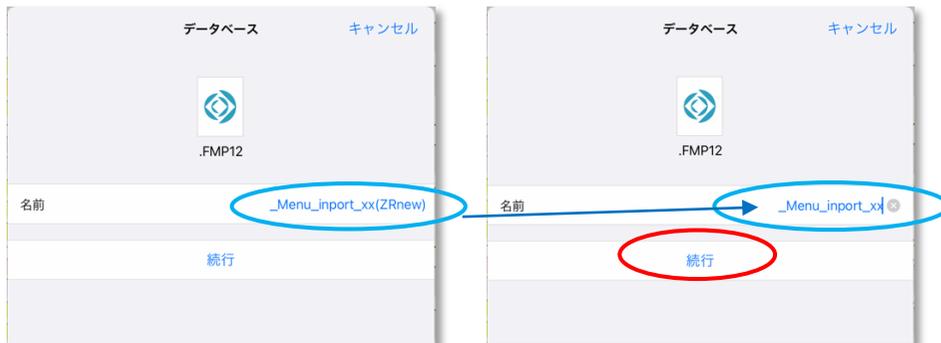

6) 保存先の選択で、「FileMaker Go に保存」を選択します。



7) 「マイ App」 ウィンドウには、iPad 上にある現在使用中のアプリ
 【Menu321】 【MenuMaker】 をタップして起動します。

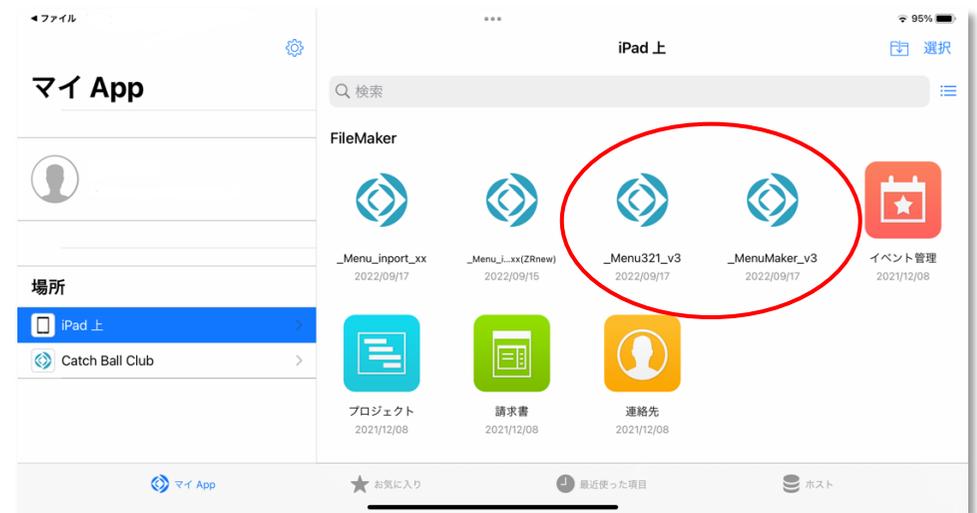

8) アプリの起動後、【操作】ボタン○から「スクリプトメニュー」を選択し、スクリプトメニューから「個別データインポート」を選択します。



9) 個別データインポートの【インポート】ボタンをタップします。



10) インポートが完了すると「メニューリスト」画面で表示されます。【初期画面】ボタンで、アプリの起動画面に戻ります。



参考) 継続して旧名称短冊を省略または削除をすることができます。

継続して作業を行う場合は、次項のページへお進みください。

□3：旧名称短冊を省略・削除するためのリスト画面操作方法

YouTube 動画解説

1：アプリ基本操作（Standard・Advanced共通）	動画 （約12分）
2：アプリ・アドバンス版の編集操作	動画 （約7分）
3：アプリ・インストールについて	動画 （約16分）
4：セミナー①「同意を増やす」アプリ活用術	動画 （約35分）
5：セミナー②「お品書き作成」アプリ活用法	動画 （約36分）

その他の資料リンク

1：ユーザーズガイド	PDF （A4, 8p）
2：追加短冊ファイルダウンロード	ユーザーサポートページへ
3：セミナー①「同意を増やす」アプリ活用術	PDF（レジュメ/A4, 15p）
3：セミナー②「お品書き作成」アプリ活用法	PDF（レジュメ/A4, 13p）
4：Menu321の追加機能「説明シート6種」	PDF（チラシ/A4）
5：ケース別料金表（販売価格リスト）	料金解説ページへ

■【MenuMaker】 & 【Menu321】 使用環境等：2022/08/01

◆開発アプリケーション：FileMaker Pro

本ツールは、FileMaker Pro 対応ドキュメントとしてご提供しています。

通常、Windows 版、Macintosh 版のご注文には、FileMaker Pro を必要としないランタイム版をお届けしています。

iPad版をご利用の場合は、事前にアプリ《FileMaker Go/最新版は無料》のインストールをご利用いただけます。

◆使用環境条件：対応OS

- Windows 64bit版：Windows 11, 10, 8, 7 (Service Pack1)
- Windows 32bit版：Windows 8, 7, Vista (SP2), XP (SP3)
- macOS 12対応版：v12, v11, v10.15, v10.14, v10.13, v10.12
- MacOS X 10対応版：v10.11, v10.10, v10.9, v10.8
- iOS：iPad版（FileMaker Go 使用）

*2022/08/01 現在のアプリ無償インストールは、FileMaker Go 19, 18

*FileMaker Pro, FileMaker Go は、Claris International社の登録商標です。

*Microsoft Windows は、米Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

*Macintosh, iOS は、米Apple Computer社の米国及びその他の国における登録商標です。



menu321.com
歯の治療メニュー制作室

[ホームページ](#)
[アプリ概要](#)
[キャンペーン](#)
[テンプレート](#)
[お問い合わせ](#)

Add_Strips

追加短冊インポートファイル

■ユーザー・サポート・コーナー（2022/09/13 現在）

追加短冊	圧縮ファイル	非圧縮ファイル
全インポートファイルまとめ ~2017.12	ダウンロード (8.32MB)	ダウンロード (14.94MB)
保険対応/CADCAM 2018.04	ダウンロード (228KB)	ダウンロード (540KB)
ヒューマンブリッジ 2019.08	ダウンロード (341KB)	ダウンロード (634KB)
ピーククラウン2種 2020.06	ダウンロード (413KB)	ダウンロード (656KB)
ベックコア 2020.06	ダウンロード (213KB)	ダウンロード (420KB)
保険適用チタンC_904 2020.08	ダウンロード (209KB)	ダウンロード (420KB)
保険CADCAM_C_903fm 2020.09	ダウンロード (242KB)	ダウンロード (452KB)
保険CADCAMインレー1_903 2022.04	ダウンロード (236KB)	ダウンロード (451KB)
保険レジン前装チタン冠_C_905 2022.05	ダウンロード (234KB)	ダウンロード (446KB)
チタン（ミリング）FP_32 2022.08	ダウンロード (779KB)	ダウンロード (1.2MB)
ジルコニア名称改訂_ZR-B,E,M,C 2022.09	ダウンロード (5.4MB)	ダウンロード (7.3MB)
アップデート操作マニュアル Ver.9/17		

□ 3：旧名称短冊を削除・省略するためのリスト画面操作方法

▼概要：

ジルコニアの名称改訂に伴い。新短冊<追加短冊インポートファイル>をダウンロードし、ご利用中のそれぞれのアプリにインポートしますと、旧い名称の短冊と新しい名称の短冊が混在することになります。

新旧の短冊番号は同じですので、2ページに掲載した「1：ジルコニア短冊名称・新旧対応表」をご覧ください、今後のアプリ使用に際して、

【削除】：新短冊だけを残して、旧短冊はすべて削除する…か、

【省略】：旧短冊は削除しないが、使用時のカテゴリー検索のリストには表示させない…か、どちらかに決めて処理することができます。

以下、その操作方法についてご説明します。この処理方法は、通常のご利用時に他の短冊に対しても、同様の操作を行うことができますのでご利用ください。但し、【省略】処理した短冊は、再度リストアップ表示させることは簡単操作で出来ませんが、【削除】処理した短冊を元に戻すことは簡単操作では出来なくなりますのでご注意ください。

▼操作手順：【Windows】 【MacOS】 【iPad】 共通

※操作は、アプリ「MenuMaker」「Menu321」同様です。

1) 初期画面の【メニューリスト】ボタンを選択します。




2) 検索欄に「Crown」を入力し【カテゴリ検索】ボタンを選択します。



3) 次に、同じメニューリスト画面の【ソート】ボタンを選択します。

4) 「レコードのソート」ウインドウが表示されます。

※ソート優先順位欄に「Part」項目がある場合は、選択して【移動】ボタンで消去し、下図の状態です【ソート】ボタンを選択します。

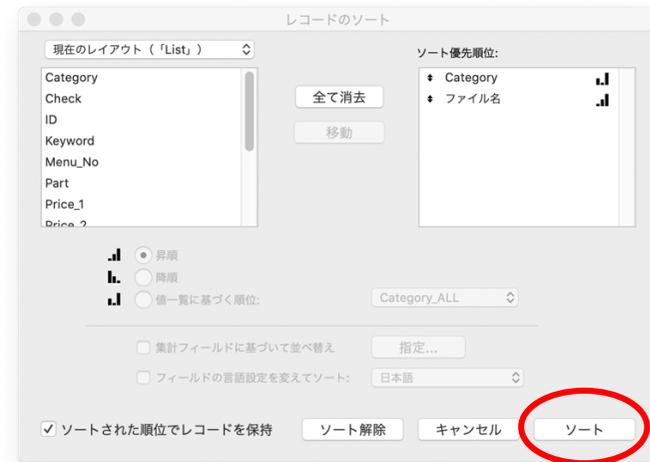

5) メニューリストには、ファイル名順にクラウンの短冊が表示されます。

▼確認事項：

- ①ソート作業によって同じファイル名の短冊が上下に並んで表示されます。
- ②ジルコニア名称が改訂された新短冊のファイルパス欄には、[●ZR-B]との記載がしてありますので、同じファイル名でファイルパス欄が空欄の短冊が旧名称のジルコニア短冊であることがわかります。

ご注意) ジルコニア名称改訂に伴う追加短冊数は、合計27枚です。

内、2枚は新しく追加されたものです。(C_151_f、C_151_m)


また旧名称で削除する短冊が2枚あります。(C_207_fm5、C_207s_fm5)

お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。

2022/09/19

■メニューリスト

ID	ファイル名	Category	前歯	臼歯	Check	操作	ファイル名	ファイルパス
1	C_101_f	Crown	前歯		<input checked="" type="checkbox"/>	複製 削除	C_101_f	
656	C_101_f	Crown	前歯		<input checked="" type="checkbox"/>	複製 削除	C_101_f	●ZR-B
2	C_101_m	Crown	臼歯		<input type="checkbox"/>	複製 削除	C_101_m	
657	C_101_m	Crown	臼歯		<input checked="" type="checkbox"/>	複製 削除	C_101_m	●ZR-B

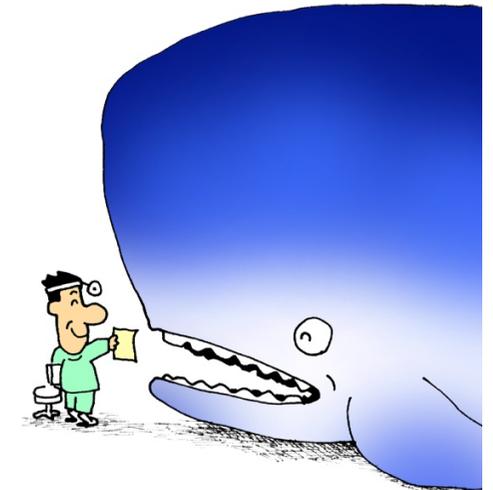

その他、何なりとお問い合わせください。

- ◎バージョンアップ
- ◎アップグレード
- ◎スタッフセミナー
- 等々

①：旧名称のジルコニア短冊を削除する場合は、[●ZR-B]の記載がない短冊の【削除】ボタンを選択します。

②：旧名称の短冊を削除せずに、リストアップ表示を消去する設定にする場合は、[●ZR-B]の記載がない短冊のチェックBOXを空白にします。

歯の治療メニュー制作室：蔵満正樹

kuramitsu@menu321.com